

CONHEÇA A


nexgeen Centrifuge




Preparo de PRP, PRF e SVM com desempenho e durabilidade consistentes.

A **Nexgeen Centrifuge S-106** foi especialmente concebida para o preparo de PRP, PRF e SVM com os mais altos níveis de qualidade. Com sua tecnologia de aceleração e desaceleração controlada, proporciona máxima estabilidade para dispositivos de preparo de PRP e PRF que não utilizam gel.

Alta taxa de recuperação plaquetária

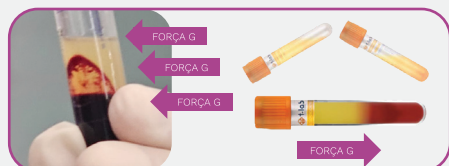

Com o rotor basculante, a força é proporcional a cada célula, promovendo uma distribuição de energia suave, além de uma velocidade estável. **A taxa de recuperação de plaquetas é aproximadamente 30 a 50% maior do que as centrífugas com rotor fixo.**

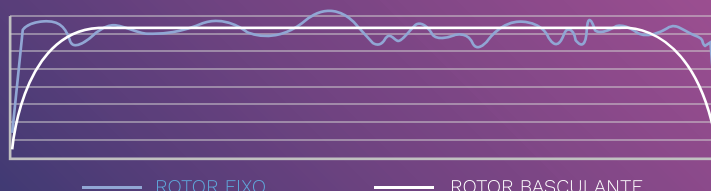

O design do seu interior, aliado à tecnologia do motor sem escovas de carvão, assegura uma ventilação inteligente, que proporciona o máximo de controle da temperatura. É muito importante que as células permaneçam abaixo da temperatura corporal em aplicações de PRP e SVM (Microenxerto Super Viável). Em temperaturas acima da média corporal, o sangue sofre hemólise e, nas aplicações de SVM, ocorre diminuição da viabilidade celular. O uso intensivo de centrífugas convencionais, principalmente em climas quentes, aumenta essa possibilidade.




A alta qualidade de sua matéria-prima e processo de fabricação garante uma vida útil cerca de 3 vezes mais longa do que as centrífugas comuns.

Conheça as soluções da Nexgeen para preparo de derivados plaquetários.

Next PRP: uma solução flexível, inteligente e custo-efetiva para preparo de PRF, PRP e L-PRP em protocolos de 4 a 8 minutos.

Tubos PRP: tubos com micropolimento interno. Potencialize em 3 X uma aplicação de PRP.

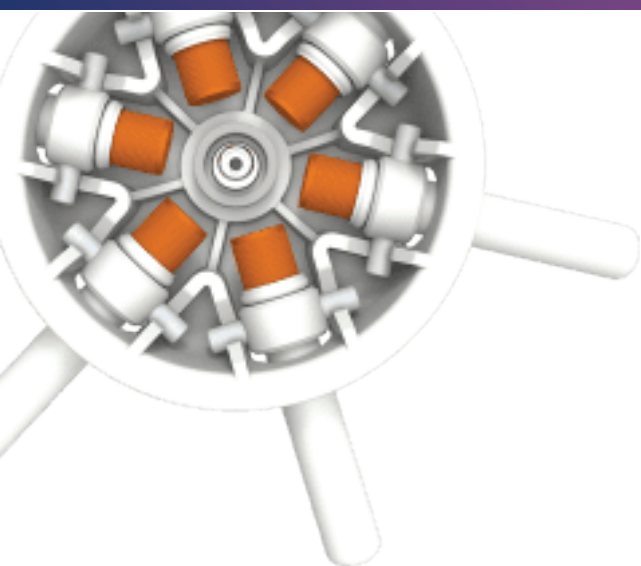

Conheça as especificações e vantagens da primeira centrífuga portátil com rotor basculante do Brasil.



Conversão RPM/RCF com um toque e opção de operação de *short spin* tocando no display.



Projetada para ser compacta e fácil de transportar: 8,2 kg; 381x480x185 mm.



Controle por microprocessador para desempenho eficiente mesmo sob altas cargas.



Recurso de detecção de desequilíbrio com segurança de parada automática.



Design exclusivo de rotor basculante, que permite o uso de 6 tubos de 10 ml.



Seleção de velocidade variável de 500 a 4000 RPM. Configuração em passos de 10 RPM.



Livre de manutenção. Motor sem escovas de carvão (BLDC), dura cerca de 3 vezes mais (10.000 horas).



Trava motorizada com mais resistência e confiabilidade. Abre automaticamente na conclusão do ciclo.



Display digital com configuração de velocidade e tempo.



Favoritos: permite ao usuário salvar até 99 configurações.

IMPORTANTE

A Nexgeen não faz aconselhamento clínico. Os conteúdos apresentados em nossos materiais promocionais, guias técnicos e website possuem apenas finalidade de informação geral. As informações não se destinam a substituir o aconselhamento, diagnóstico ou tratamento de um profissional de saúde. A confiança em qualquer informação fornecida nos nossos materiais promocionais é exclusivamente de sua própria conta e risco, pois as necessidades clínicas de cada indivíduo são muito diferentes. Você jamais pode presumir que estas informações relativas a determinadas condutas de tratamento ou resultados também são aplicadas a você. Em vez disso, você deve avaliar sua condição clínica e tomar decisões de tratamento com base em uma consulta com um profissional de saúde de sua confiança.

Registro ANVISA: 82251719008



Aponte sua
câmera para o
QR CODE
para saber mais!

Rua Francesco Coppini, 68 - 2º andar
Nova Gerty, São Caetano do Sul - SP | CEP: 09580-000
comercial@nexgeen.com.br +55 (11) 2668 5368
nexgeen.com.br

nexgeen
BIOSOURCE